

一般家庭用

DHC



Dear Slim

Face & Body Slimming Roller

DHC

DHC ディア スリム(フェイス&ボディ)

取扱説明書

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- 他の人に貸したり、譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書と一緒ににお渡しください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

INDEX

DHCディアスリム

(フェイス&ボディ)の特長 — 2~3

ローラーの動きについて — 4~5

歳差ローラーでマッサージ — 6~8

冷感&温感マッサージ — 9

安全上のご注意など — 10

Q&A — 11

アフターサービス — 12~13

製品仕様 — 14

保証書 — 15

保証書付

保証書はこの取扱説明書のP15についています。
必ずお客様ご自身でご記入ください。

保管用

修理を希望される際は、保証書の内容を事前にご確認のうえ、ご連絡ください。

DHCお客様サービスセンター

0120-575-391

9:00~20:00(土 9:00~17:00)
日・祝日/年末年始休業

製品の内容・使用方法などのご相談・お問い合わせ

DHC美容相談室

0120-575-370

9:00~20:00(土 9:00~17:00)
日・祝日/年末年始休業


いつでも、どこでも。親愛なるマッサージローラー

DHC ディア スリム (フェイス&ボディ)



「DHCディアスリム(フェイス&ボディ)」は、“^{さいさ}歳差運動”の原理を利用した、DHCオリジナルのマッサージローラー。複雑な動きをする2つのローラーの摩擦と回転により、肌をつまみ上げたり、押し広げたりすることで、筋肉のこりをほぐし、血行を促進します。いつでもどこでも手軽におこなえるマッサージで、美しいフェイスライン、ボディラインをめざせます。

歳差運動とは

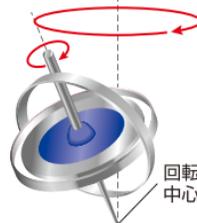

回転の
中心点

回転する物質の回転軸が、コマのように振れる運動のこと。ローラーの回転軸が、点を中心に円を描くように回転します。「DHCディアスリム(フェイス&ボディ)」は、2つのローラーがそれぞれに歳差運動をおこなうことで、複雑で多彩なローリング運動を可能にしています。

ローラーの動き(歳差運動)について

ローラーが回転し、2つのローラーの間隔が狭くなると、肌を引き寄せられます。間隔が広くなると、引き寄せられた肌が元に戻り、押し広げられます。肌にあたるローラーの角度により、肌をつまみ上げる強さを調節できます。お好みの角度でお使いください。



グリップ


女性の手のひらにもすっぽりと収まる、握りやすいサイズ。球状のため、握り方によって肌にあたるローラーの角度を簡単に調節でき、さまざまな方向からマッサージすることができます。

ローラー


歳差運動により、複雑な動きをします。

グリップを進行方向側に傾けるほど、肌を強くつまみ上げます。


強くつまみ上げるローリング

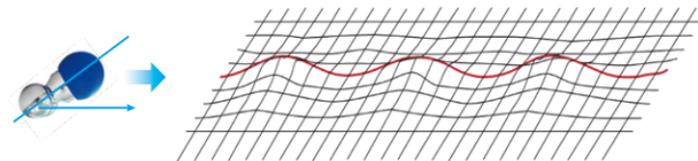

普通につまみ上げるローリング

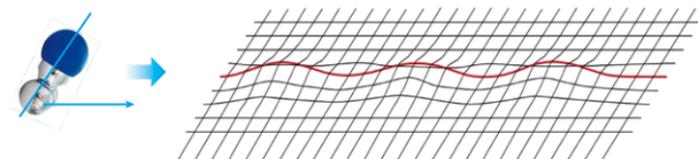

弱くつまみ上げるローリング

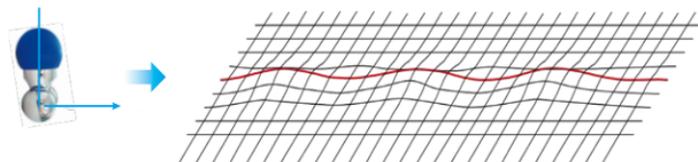

歳差ローラーでマッサージ

フェイスラインのケア

ローラーを頬にあて、肌を持ち上げるようにローリング。さらに、あごから耳に向かって、下から上へとフェイスラインをケアします。




目じりのケア

片方のローラーを目じりにあて、こめかみまでをやさしくローリング。




首すじ・肩のケア

ローラーを首にあて、首すじに沿ってローリング。さらに、首の下から腕に向かって、肩のこりをほぐすようにローリングします。

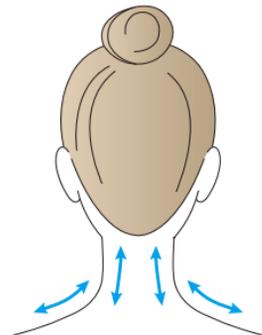

お腹・ウエストまわりのケア


ローラーをお腹まわりの気になる部分にあて、上下左右にローリング。

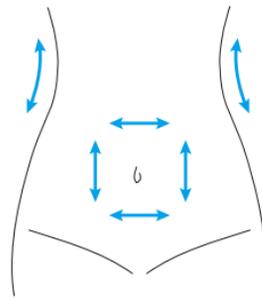

※使用する際は、ネックレスやピアスなど身に付けているアクセサリー類を外してください。巻き込む場合があります。
※髪の毛を巻き込まないように注意して使用してください。


腕のケア

ローラーを腕にあて、手首までを上下にローリング。ゆっくり、揉みほぐすようにおこないます。

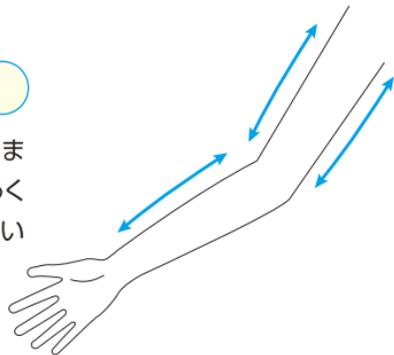

脚・太もものケア


ローラーを太ももにあて、膝までをゆっくり上下にローリング。つまみだすような感覚でおこないます。さらに、ふくらはぎ全体を上下にローリングします。

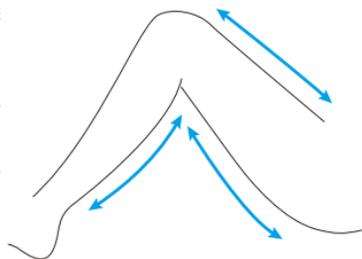

冷感&温感マッサージ

ローラーには熱伝導率の高い鋼材を使用しているため、本体を冷やしたり温めたりすることで、冷感マッサージや温感マッサージもおこなうことができます。リフレッシュしたい時は本体を冷蔵庫に入れたり、ローラーに氷をあてて冷やして、リラックスしたい時はローラーを手で握って温めて、お好みにあわせてお使いください。

ローラー部分の構造

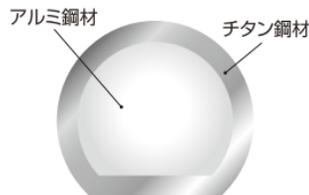

ローラーの内側には、熱伝導率の高いアルミ鋼材を使用。ローラーの外側には、変化が極めて低く、物性が安定しているチタン鋼材を使用し、金属アレルギーの方にも配慮しました。

熱伝導率の高さを検証

置いていない状態



10秒後



熱の伝導率が高く、氷の熱をすばやく吸収し、放熱するため、氷の上に置くとみるみる氷を溶かします。

安全上のご注意

- 落下に注意して使用してください。
- 眼球、上まぶた、耳、唇、のどぼとけ周辺、アキレス腱、骨が出っ張っている部位には使用しないでください。
- お肌に異常のある部位には使用しないでください。
- お肌に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 浴室内など水のかかるところでは使用しないでください。
- 水につけたり、沈めたりしないでください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 分解したり、修理・改造をしないでください。
修理は、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。

お手入れ方法

- 使用後は、乾いた布、またはかたく絞った布でローラーや本体についた汚れをやさしくふき取ってください。水洗いは絶対にしないでください。
- 本体に水がかかったときは、直ちに乾いた布でふき取ってください。湿ったまま保管すると、カビやサビの原因になりますので、風通しのよい所で完全に乾かしてから保管してください。

保管方法

- 高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所を避け、風通しのよい清潔な場所に保管してください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

保守点検について

長期間使用しなかった後に使用するときは、本体を乾いた布でていねいに拭いた後、異常がないか確認した上でご使用ください。

Q&A

Q. どのくらいのペースで使用したらよいですか。

毎日お使いいただけます。回数や時間は、お肌の状態を見ながら調節してください。

Q. 力を入れてローリングするのがよいですか。

やさしくローリングするだけで、お肌とローラーが吸いつきまです。力を入れなくてもローラーが回転することによりお肌がつまみ上げられたり、押し広げられます。お肌にあたるローラーの角度により、強さを調節することができます。

Q. お風呂で使用できますか。

ローラーのまわりは防水仕様になっておりませんので、浴室、浴槽内では使用しないでください。

Q. 敏感肌ですが、使用できますか。

最初に二の腕など目立たないところで使用することをおすすめします。お肌に異常がないことを確認して、他の部位に移ってください。お肌に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

Q. DHCの他の美容器具と併用できますか。

同時使用はできません。時間を置くことで使用できる場合もありますので、DHC美容相談室にご相談ください。

アフターサービス

1.保証書

- P15に添付しています。
- 保証書に「お買い上げ日」を必ずお客様ご自身でご記入ください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください。

3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。

- 保証期間中の修理
保証規定により無料修理をさせていただきます。
製品に保証書を添えて、DHCお客様サービスセンターにお申し出ください。
- 保証期間が過ぎている修理
修理可能な製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。
DHCお客様サービスセンターにご相談ください。

〈修理部品について〉

修理部品は、一部仕様や外観色を変更することがあります。

4.アフターサービスについてご不明の場合

DHCお客様サービスセンターにお問い合わせください。

返品・交換の際の送付先

〒136-0075
東京都江東区新砂1-9-1
株式会社ディーエイチシー
返品・交換係行

お客様ご自身での修理は
大変危険です。
分解したり手を加えたり
しないでください。

〈保証規定〉

保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従って正常なご使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき弊社が無料修理をさせていただきます。

お買い上げ日から1年以内に故障した場合には、製品に保証書を添えてDHCお客様サービスセンター宛にお送りください。送料は弊社が負担いたします。

- 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。その際の送料はお客様負担となります。
 - (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変などによる故障または損傷。
 - (ニ)車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ)業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ)保証書のご提示がない場合。
 - (ト)保証書にお買い上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (チ)故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 2.贈答品などで、万一、保証書にお買い上げ日が記入されていない場合には、DHCお客様サービスセンターへご相談ください。
- 3.保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
 - 保証書に明示した期間、条件の元において無料修理をお約束するものです。従って、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについては、有料となります。
 - 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 4.保証書に記載された個人情報、対象製品の保守サービス・安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。

修理を希望される際は、保証書の内容を事前にご確認のうえ、ご連絡ください。

DHCお客様サービスセンター
0120-575-391
9:00~20:00(土 9:00~17:00)日・祝日/年末年始休業

製品仕様

本体寸法	W82×H90×φ50mm
材質	本体：ABS+装飾クロムメッキ （ローラー：アルミ+クロムメッキ+酸化チタン蒸着） （グリップ：シリコンゴム）
本体重量	180g
ローラー	ローラー径：φ35mm ローラー間隔：9.8mm～13.8mm ローラー開き角度：70度 歳差運動傾斜角度：2度
防水	IPX7相当（軸受部は非防水）
製造国	日本

【製品を廃棄する際のお願い】

廃棄する際は、各自治体の条例に従ってください。

修理を希望される際は、保証書の内容を事前にご確認のうえ、ご連絡ください。

DHCお客様サービスセンター

0120-575-391

9:00～20:00（土 9:00～17:00）
日・祝日/年末年始休業

製品の内容・使用方法などのご相談・お問い合わせ

DHC美容相談室

0120-575-370

9:00～20:00（土 9:00～17:00）
日・祝日/年末年始休業

DHCディアスリム(フェイス&ボディ) 保証書

保証期間	お買い上げ日から 1年	
お買い上げ日	年 月 日 <small>※お買い上げ年月日につきましては、弊社にてデータ管理をしておりますが、納品書に記載されている年月日を必ずお客様ご自身でご記入ください。ご記入の無い場合、無効となる場合があります。</small>	
お客様様	お名前	様
	ご住所	〒
	電話番号	- -

（キリトリ線）

DHC

株式会社ディーエイチシー
東京都港区南麻布2-7-1