

DHC ボディエキスパート(本体) 保証書

保証期間		お買い上げ日から 1年間	
お買い上げ日		年 月 日 ※お買い上げ年月日につきましては、弊社にてデータ管理しておりますが、納品書に記載されている年月日を必ずお客様ご自身でご記入ください。ご記入の無い場合、無効となる場合があります。	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
	電話番号		

保証規定につきましては23ページをご確認ください。

修理を希望される場合は、保証書の内容を事前にご確認のうえ、ご連絡ください。

DHCお客様サービスセンター
0120-575-391

9:00~20:00 (土 9:00~17:00) 日・祝日/年末年始休業

製品の内容・使用方法などのご相談・お問い合わせ

DHC美容相談室
0120-575-370

9:00~20:00 (土 9:00~17:00) 日・祝日/年末年始休業

《キリトリ線》

一般家庭用

DHC BODY EXPERT

DHC ボディエキスパート

取扱説明書

ご使用の前に、本取扱説明書を必ずお読みください。

このたびは「DHCボディエキスパート」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、またご使用中には必ず本取扱説明書をお読みになり、正しくご使用いただきますようお願いいたします。なお、お読みいただきました後も、本取扱説明書を大切に保管してください。また、他の人に貸したり、譲渡する場合は、必ず本取扱説明書を一緒にお渡しください。

INDEX

- 安全上のご注意 2~5
- 各部の名称および説明 6~7
- ご使用前の準備 8~9
- 使い方 10~12、15
- トリートメント例 13~14
- 「故障かな?」と思ったら 16~18
- Q&A 19
- 商品仕様・アフターサービス 20~23
- 保証書

保証書付

保管用

保証書は本取扱説明書の裏表紙についています。必ずお客様ご自身でご記入ください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

取扱説明書には、お使いになる方や他の方への危害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

 危険	 警告	 注意
「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。	「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

-  は、してはいけない「禁止」の内容です。
 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

危険

 禁 止	● 次のような医療電子機器との併用は絶対にしないでください。 ① ペースメーカーなどの体内植込型医療電子機器 ② 人工心臓などの生命維持用医療電子機器 ③ 心電計などの装着型医療電子機器 誤作動を招く恐れがあります。 ● 本体は生活防水です。水中使用やシャワー、蛇口からの流水を直接本体にあてて使用しないでください。 感電やショックにより重大な事故の可能性があります。
---	--

警告

● 次のような方は、絶対に使用しないでください。

◆ 心臓に疾患がある方 ◆ 交通事故などによる頭部および眼科的後遺症のある方 ◆ 急性疾患/有熱性疾患/感染性疾患/結核性疾患の方 ◆ 悪性腫瘍のある方 ◆ 顔面神経痛の方 ◆ ケロイド体質の方 ◆ アレルギー体質の方 ◆ その他体調のすぐれない方(熱があるとき・血圧に異常があるとき・頭痛がするときなど) ◆ 皮膚に異常がある方(顔面黒皮症の方・アトピー性皮膚炎の方・色素異常の方・特に肌に敏感な方・皮膚炎を起こしている方・肌が赤くヒリヒリし、炎症を起こしている方など) ◆ ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で、毛細血管拡張を起こしている方 ◆ 血友病の方 ◆ 目の病気のある方 ◆ アルコールを摂取している方 ◆ 疲労の激しい方 ◆ 痛覚・知覚に障害のある方 ◆ インプラント・歯の矯正治療をしている方 ◆ 顔面に金属やプラスチック・シリコンなどを埋め込んでいる方 ◆ 妊娠中および出産直後の方 ◆ 生理中の方
事故・トラブルの恐れがあります。

● 次のような部位には、絶対に使用しないでください。

◆ 心臓周辺 ◆ 顔面 ◆ 耳 ◆ のどぼとけ周辺 ◆ 皮膚疾患のある部位 ◆ ニキビのある部位 ◆ 皮膚に炎症・その他異常がある部位 ◆ 肝斑 ◆ 傷口 ◆ 体内に金属やプラスチック・シリコンなどを埋め込んでいる部位 ◆ 手術をした部位 ◆ 脱毛や剃毛処理をした直後の部位 ◆ 陰部・肛門 ◆ ウイルス性いぼ
事故・トラブルの恐れがあります。

● お子様へのご使用は避けてください。

● 指定の使用目的以外には使用しないでください。

● 本体の使用を終了した直後に、再度同部位をトリートメントしないでください。 体調不良を起こすことがあります。





⚠ 警告

 禁 止	●他の美容器具と同日に同部位へ使用しないでください。 トラブルの恐れがあります。 ●本体内部に異物を入れないでください。 火災・感電・故障の原因になります。 ●水につけたり、沈めたりしないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。 ●絶対に分解したり修理・改造をしないでください。 感電・発火・故障の原因になります。 修理は、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。
 強 制	●通院中の方・薬を服用中の方は医師にご相談のうえご使用ください。 ●使用時間や頻度は、本取扱説明書の指示を守ってください。 トラブルの恐れがあります。 ●使用するときは、必ず身に付けているすべての金属類を外してください。 強い電気ショックを受ける恐れがあります。 ●本体の動作などに異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。 ●使用しないときは必ず電源を切ってください。 火災・事故の原因になります。

⚠ 注意

 禁 止	●本体の上に重い物を置いたり、衝撃(高い所からの落下など)を与えないでください。 火災・故障・トラブルの恐れがあります。 ●車の中、火気の近く、直射日光の当たる場所、温度や湿度の高い場所などでの使用・保管はしないでください。 本体の寿命を縮めたり、暑さによる本体変形などの原因になります。 ●お手入れのときは、シンナー・アルコール・ベンジン・灯油などの溶剤や薬品類・磨粉・油分などは使用しないでください。 ひび割れ・引火の原因になります。 ●本体を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。 Designed for use only in Japan.
 強 制	●長期間使用しないときは電池を本体から抜いてください。 ●本体および付属品などを廃棄するときは、環境への影響を少なくするため、地域で定められている規則に従ってください。 ●電流で強い痛みを感じるときは、低い出力で使用してください。 ●身体に異常(気分が悪くなる・痛みを感じる)、特に発疹・発赤・かぶれ・かゆみなど皮膚の異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

各部の名称および説明

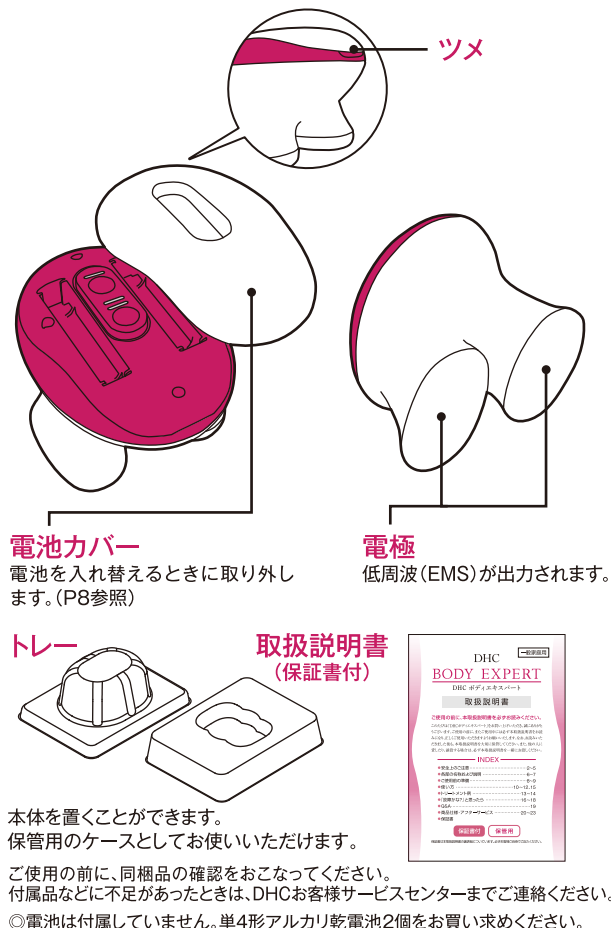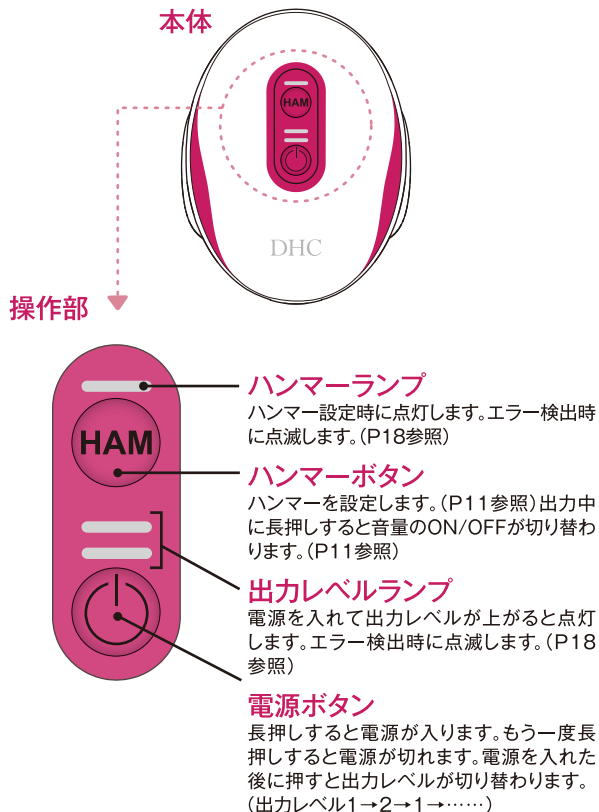

ご使用前の準備

本体は、電池(単4形アルカリ乾電池)を2本使用して出力します。

1. 電池を入れます。

電源が入っていないことを確認してから、ツメを押上げて電池カバーを開けます。図の表示に合わせて確実に電池を入れてください。



単4形アルカリ乾電池(付属していません)

2. 電池カバーを閉めます。

電池を入れたら電池カバーをしっかりと閉め、確実に閉まっていることを確認してください。



注意

本体に単4形アルカリ乾電池以外を入れないでください。感電・発火・故障の原因になります。

- 使用しないときは必ず電源を切ってください。
 - 長期間使用しないときは電池を本体から抜いてください。
 - 電池は定期的な点検または交換が必要です。
 - 電池を入れるときは、プラスとマイナスの向きを間違えないでください。
 - 電池を交換するときは、2本まとめて交換してください。
 - 古い電池や新しい電池、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
 - 充電式電池は使用しないでください。
 - アルカリ電池のご使用をおすすめいたします。
- ※ 本体の故障や、電池の液漏れなどの恐れがあります。

3. 電源が入るか確認します。

使用前にボタンを操作し、本体が正常かつ安全に作動するか確認してください。電源を入れた後に出力レベルランプが点滅するときは、電池残量が少なくなっています。電池を交換してください。


- ・出力レベル1のみ点滅するときは、使用できますがすぐに電池残量がなくなります。
- ・出力レベル1と2が点滅するときは使用できません。自動(5秒)で電源が切れます。



4. DHCボディエキスパート用ジェルを用意します。(別売)

5. トリートメント前のお手入れをします。

トリートメント部位の汚れや汗などを落とし、清潔に整えてください。

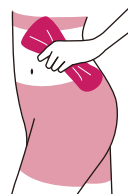

警告・注意

- 必ず身に付けているすべての金属類を外してください。
- お子様などが、本体や付属品を口に入れたり、他の用途に使わないよう充分に注意してください。事故や故障の原因になります。



DHCボディエキスパート用ジェル

DHC ボディコンシャス
ジェルスムーザー
(ボディ用マッサージ剤) 200g

商品番号23289

トリートメント効果をひきだす、みずみずしいジェル。うるおいを与える2種のコラーゲンとヒアルロン酸、ハリをもたらすプロテオグリカン、キメの整った透明感ある素肌に向くビタミンC誘導体、ハママリス葉エキスの多彩な美肌成分を配合しました。さらに、クダモノトケイソウ果実エキスやチャ葉エキス、ボタンエキスをプラスし、なめらかスタイルをバックアップ。EMS美容器とともに使用することで、しなやかでハリのあるボディがめざせます。

使い方


本体のご使用は本取扱説明書に定められた手順に従い操作し、正しくご使用ください。

本体の2つの電極が両方ともお肌にしっかり密着するようにしてご使用ください。

1. 専用ジェルを塗布します。

トリートメント部位に専用ジェルをたっぷり塗布してください。

塗布量が少ないと、トリートメントの効果が十分に発揮されないときがあります。トリートメントの途中で乾きを感じたらつけたしてください。

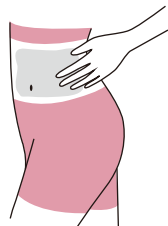


2. 電源を入れ、出力を開始します。

電源ボタンを長押しすることで出力を開始します。

8秒かけて出力がゆっくりと上がります。

※出力を開始してから10分間出力します。5分経つと経過音が鳴ります。


※電極に金属製の棒やハサミ、ピンなどを当てないでください。ショート・感電の原因になります。

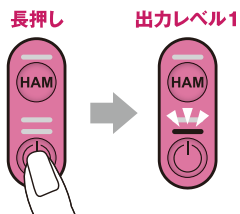

3. 出力レベルを調節します。

電源ボタンをもう一度押すと出力レベル2になります。


もう一度電源ボタンを押すと出力レベル1に戻ります。

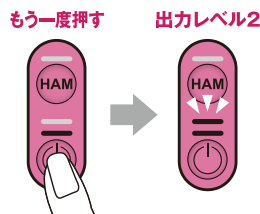

4. ハンマーを設定します。

ハンマーとは通常の出力に叩くような刺激を加える機能です。

ハンマーボタンを押すことでハンマー出力します。もう一度ハンマーボタンを押すとハンマー出力を解除します。

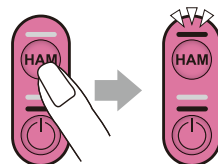

⚠ 注意

- ご使用開始当初は、出力レベル1で使用してください。
- 刺激に対し身体が慣れてからも、始めは出力レベル1で使用し、その後出力レベル2に上げてください。
- 苦痛を感じる高い出力レベルで長く使用すると、まれに筋肉が痙攣したり、火傷・発赤・痛みなどの原因になるときがありますので、ご注意ください。
- 本取扱説明書にて指定したトリートメント例以外でのご使用はお控えください。(P13～14参照)
- トリートメントの目安は、1部位に対して1日10分としてください。
- 身体に異常を感じたり、発疹・発赤・かぶれ・かゆみなどが現れたときは、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 使用中を中断するときや使用中に中座するときは、電源を切ってください。

■ 音量切替

出力中にハンマーボタンを3秒長押しすることで、ON/OFFを切り替えることができます。

※お買い上げ時は「ON」に設定されています。設定変更された音量は次の設定変更まで変わりません。



■トリートメントを途中で止めるには
出力中に電源ボタンを長押しすることで
電源が切れ、出力が停止します。
トリートメントを再開するときは、トリートメ
ント部位に専用ジェルをたっぷり塗布し、
電源を入れて出力を開始してください。
(P10～11参照)

長押し




5.ご使用後のお手入れ

電源ボタンを長押しすることで電
源が切れます。電極についた専用
ジェルはふき取ってください。

※本体は、次回の使用に支障のないよう、
電源が入っていないことを確認して
から、乾いたやわらかい布で汚れをふ
き取り清潔にしてください。

※温度、湿度の高い所、ほこりの多い所での保管はしないでください。
劣化を早め、事故や故障の原因になります。

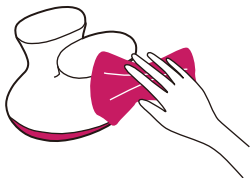

⚠ 注意

お手入れのときは、電源が切れていることを必ず確認して
ください。

電源が入ったままでお手入れをすると、刺激を受けるとき
があります。


トリートメント後、お肌に残った専用
ジェルは、手でなじませてください。ベ
タつきが気になるときは、ふき取るか、
水かぬるま湯で洗い流してください。



トリートメント例


トリートメント時間：1部位に対して1日10分

腕

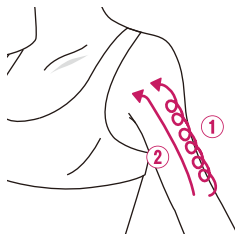


①②二の腕を肘から肩に
向かって流す

腹・ウエスト

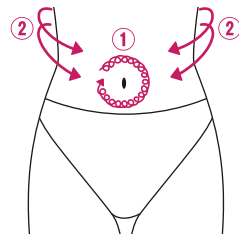


①腹部（ヘソ周り）を時計
まわりに流す
②ウエストラインを後ろ
からヘソに向かって流す

太腿部

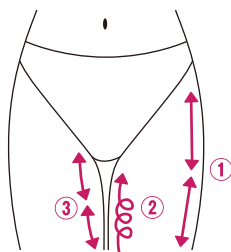


①太腿部前面の外側を流す
②③太腿部内側を流す

ヒップ

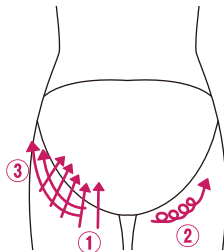


①②ヒップラインをヒップ中央
に向かって引き上げる
③ヒップラインを引き上げる

太腿部・腰

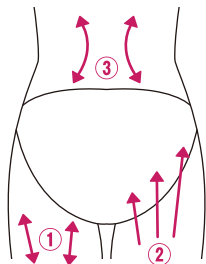


- ①太腿部後ろを流す
- ②太腿部後ろを流しながらヒップラインに向かって引き上げる
- ③腰を流す

背中

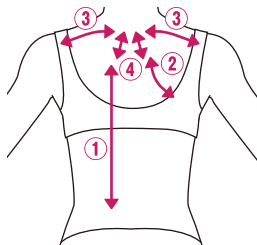

- ①背骨の両脇を流す
- ②肩甲骨の外側を流す
- ③肩を流す
- ④頸部側部を流す

ふくらはぎ

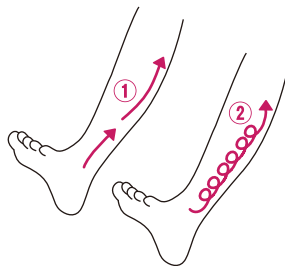

- ①②ふくらはぎを膝裏に向かって流す

足裏




- ①足首の後ろを流す
- ②くるぶしの外側を流す
- ③足裏のかかと部分を流す
- ④足裏の指の付け根からかかとに向かって流す

■防水について

本体の防水機能は生活防水※です。水中での使用や水を勢いよくかけないでください。

※本体は防水性能IPX4に対応しています。防水性能を保つために、ご使用のときは電池カバーが確実に閉まっていることを確認してください。

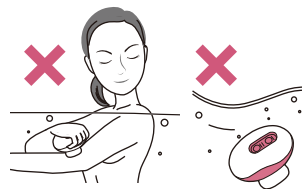


⚠ 注意

電池カバーはしっかりと閉めてご使用ください。本体を水に沈めたり、内部に水が入ると発火・ショートなどの事故や故障の原因になります。



■出力について

本体は特殊な電流を出力します。そのときに多少音がしますが、故障ではありません。また、トリートメント部位の水分量が減ったときも音がします。専用ジェルを追加塗布してください。

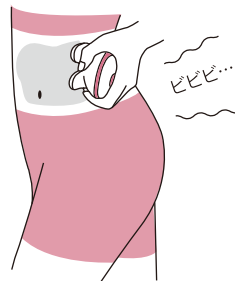


『故障かな?』と思ったら

作動不良などが起こったときは、本取扱説明書をよくお読みになり、次の点をご確認ください。また故障のときは、内部機構をさわらずに、DHCお客様サービスセンターへご相談ください。

1. 電源が入らない(操作できない)


「ご使用前の準備」(P8~9)をご確認ください。

それでも本体の電源が入らない(操作ができない)ときは、次の点をご確認ください。

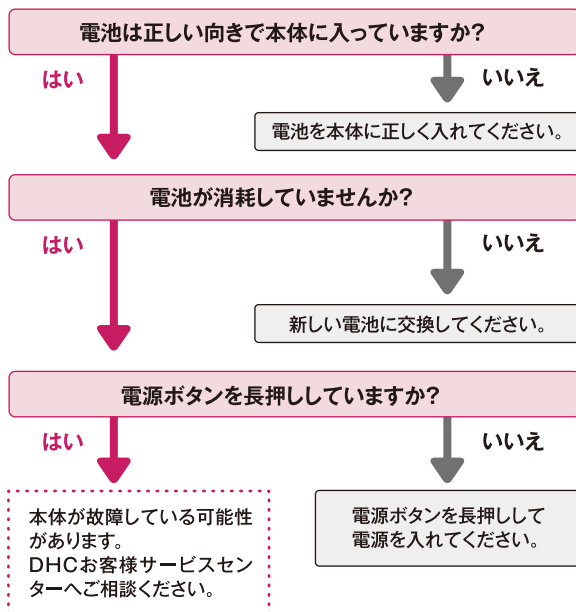

2. 出力されない

いつもと同じ出力レベルなのに、いつものような使用感がないときは、次の点をご確認ください。

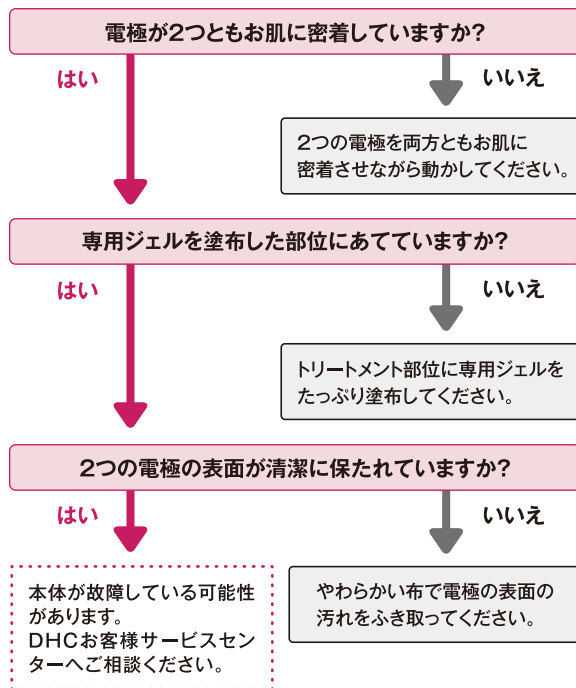

3.エラー表示


以下のエラーが表示されたとき、次のように対応してください。

エラー表示	原因	対応
 ハンマーランプの点滅と、出力レベルランプが2秒に1回もしくは2回点滅	出力中に本体の安全装置が働いた、または本体回路の不具合を検出	一旦電源を切り、電極をふいたうえで電源を入れ直してください。それでも直らないときは、本体の修理が必要です。DHCお客様サービスセンターにご相談ください。
 ハンマーランプの点滅と、出力レベルランプが2秒に3回点滅	本体回路の不具合を検出	電池を入れ直してください。それでも直らないときは、本体の修理が必要です。DHCお客様サービスセンターにご相談ください。

※ご使用条件によって本体表面が温かくなるときがありますが異常ではありません。

■製品・電池を廃棄するときのお願い

各自治体の条例や廃棄方法に従ってください。

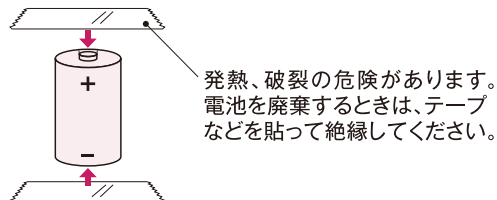

Q&A

Q どのくらいのペースで使用したらよいですか。

A 毎日お使いいただけます。体調を考慮しながら使用してください。ただし、1日に何度も使用しますと、お肌に刺激や負担を与えてトラブルの原因になる恐れがあります。

Q 敏感肌ですが、使用できますか。

A 「安全上のご注意」(P2～5)に記載した症状に該当する方や、該当する部位には使用できません。

Q 他の美容器具と併用できますか。

A 併用はできます。ただし、同日に同部位へ使用しないでください。また、同様の機能をもった美容器具との併用については、DHC美容相談室にご相談ください。

Q トリートメントに他のスキンケアを使用できますか。

A DHCボディエキスパート用ジェル「DHCボディコンシャスジェルスムーザー」の使用をおすすめします。DHCボディエキスパートの効果をひきだすジェルです。

Q 使用中、ビリビリと刺激を感じます。どうしてですか。

A 敏感な部分は多少の刺激を感じることがありますので、レベルの調節をしてください。また、専用ジェルの塗布量が少ないことや、お肌にトラブルを抱えていることが考えられます。体質、体調などが起因していると考えられるときは、使用を中止して医師にご相談ください。

商品仕様

定格電圧……………DC3V(単4形アルカリ乾電池×2本)
基本周波数……………25Hz
出力波形……………特殊波形
タイマー時間……………10分(5分後に経過音)
安全装置……………過電流保護
寸法……………全長92mm×幅72mm×高さ65mm
重量……………117g(電池含む)/94g(電池含まず)

MEMO

修理を希望される際は、保証書の内容を事前に
ご確認のうえ、ご連絡ください。

DHCお客様サービスセンター

0120-575-391

9:00~20:00(土 9:00~17:00)日・祝日/年末年始休業

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙についています。
- 保証書に「お買い上げ日」を必ずお客様ご自身でご記入ください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げの日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

本取扱説明書の内容をお確かめいただき、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。

●保証期間中の修理

保証規定により無料修理させていただきます。

製品に保証書を添えてDHCお客様サービスセンターにお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理可能な製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

DHCお客様サービスセンターにご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- 製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明のとき

DHCお客様サービスセンターにお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、一部仕様や外観色を変更することがあります。

■返品・交換の際の送付先
〒136-0075
東京都江東区新砂1-9-1
株式会社ディー・エイチ・シー 返品・交換係

お客様ご自身での修理
は大変危険です。
分解したり手を加えたり
しないでください。

〈保証規定〉

保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従って正常なご使用状態で故障した場合には、保証規定にもつき弊社が無料修理をさせていただきます。本体が保証対象となります。

お買い上げ日から1年以内に故障した場合には、製品に保証書を添えてDHCお客様サービスセンター宛にお送りください。送料は弊社が負担いたします。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

その際の送料はお客様負担となります。

- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (ニ) 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ) 業務用など一般家庭以外で使われて生じた故障または損傷。
- (ヘ) 保証書のご提示がない場合。
- (ト) 保証書にお買い上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (チ) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- (リ) 消耗部品。

2.贈答品などで、万一、保証書にお買い上げ日が記入されていない場合には、DHCお客様サービスセンターへご相談ください。

3.保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●保証書に明示した期間、条件の元において無料修理をお約束するものです。従って、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについては、有料となります。

●保証書は、日本国内においてのみ有効です。

Warranty valid only in Japan.

4.保証書に記載された個人情報、対象製品の保守サービス・安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。